

Pruebas de drogas CERTUM

Confianza y resultados rápidos en múltiples presentaciones



2004 2009

CERTUM


DIAGNOSTICS

Panel de Drogas

Registro sanitario: 0481R2018 SSA


El Panel Multidrogas CERTUM le permite realizar exámenes para detectar desde 2 y hasta 6 drogas al instante. Para realizar la prueba, sólo es necesario insertar un extremo del dispositivo en la muestra de orina durante 3 segundos y esperar 5 minutos para ver los resultados para cada tipo de droga.

Modo de Empleo

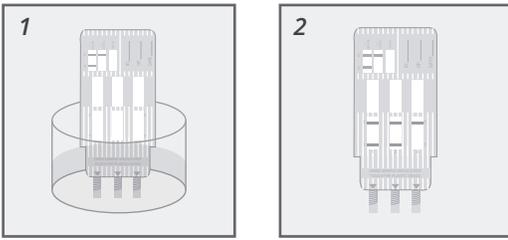

- 1.- Introduzca el panel en el frasco de orina.
- 2.- Lea los resultados después de 5 minutos.

Interpretación Resultados

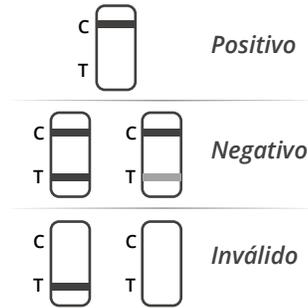


Split Screen Cup

Registro sanitario: 0277R2018 SSA


El frasco de detección múltiple Split Screen Cup es el sistema más avanzado para determinar el consumo de drogas en la orina. Debido a que cuenta con un sistema de seguridad único, termómetro y panel de resultados montado de manera independiente, este frasco se encuentra notablemente por encima de cualquier opción.

Modo de Empleo

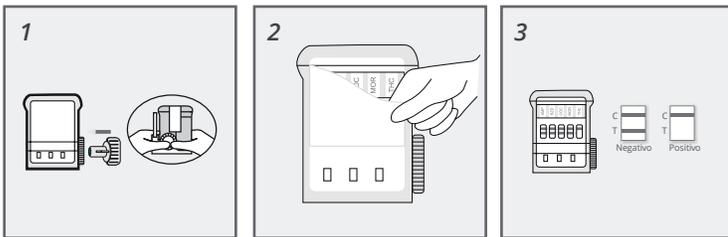

- 1.- Tome la llave de seguridad y empuje la llave dentro del orificio del recipiente para comenzar el test.
- 2.- Retirar la etiqueta donde aparecen los resultados.
- 3.- Después de 5 minutos, interprete los resultados.

Interpretación Resultados

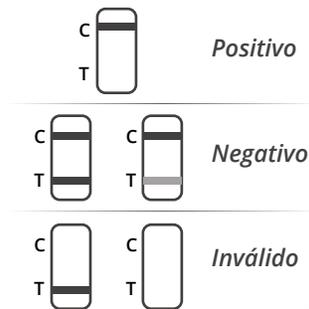


Simple Cup

Registro sanitario: 0277R2018 SSA


El frasco de detección múltiple Certum Simple Cup es el sistema más avanzado para determinar el consumo de drogas en la orina. El Frasco de detección de múltiples drogas le ofrece un método rápido, sencillo y económico para realizar sus especímenes de detección de drogas.

Modo de Empleo

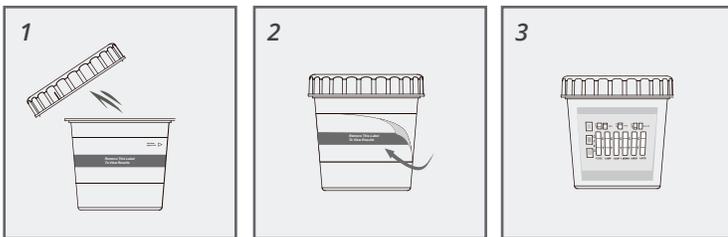


- 1.- La muestra de orina deberá vaciarse directamente en el vaso de prueba.
- 2.- Desprenda la etiqueta del vaso de prueba para relevar el resultado.
- 3.- Después de recolectar la muestra, debe cerrar adecuadamente la tapa del vaso de prueba. Leer resultados en 5 minutos.

Interpretación Resultados

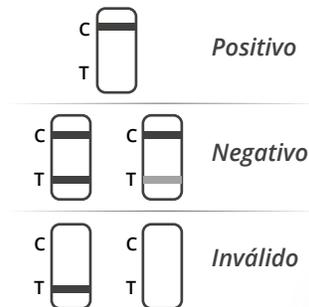


La prueba de drogas en tira es un formato sumamente económico y confiable para detectar el consumo de una droga en orina. Certum le ofrece una completa gama de pruebas rápidas para la de detección del consumo de drogas en orina. Nuestras pruebas le ofrecen la mayor confiabilidad, resultados rápidos y el método más práctico disponible. Todas nuestras pruebas de detección de drogas, cuentan con la aprobación de la FDA de los Estados Unidos y se someten a los puntos de corte establecidos por SAMHSA (Substance Abuse and Mental Health Services Administration) y NIDA (National Institute for Drug Abuse).

Modo de Empleo

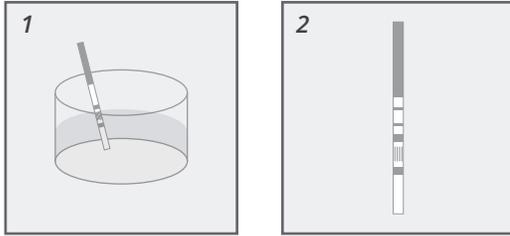

- 1.- Introduzca la tira a la muestra de orina por 10-15 segundos.
- 2.- Lea los resultados después de 5 minutos.


Interpretación Resultados

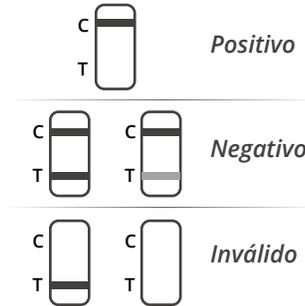

Cassette


La prueba de drogas en cassette Certum es un formato asequible y confiable para un diagnóstico de drogas en orina. Nuestras pruebas brindan la mayor confiabilidad, resultados sumamente rápidos y el método más simple presente en el mercado. Ideal para un diagnóstico efectivo, confiable y económico.

Modo de Empleo

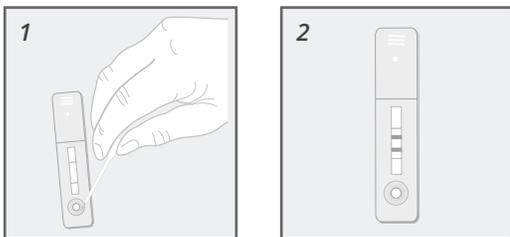

- 1.- Deposite la muestra en el pocillo utilizando el gotero incluido.
- 2.- Lea los resultados después de 5 minutos.

Interpretación Resultados

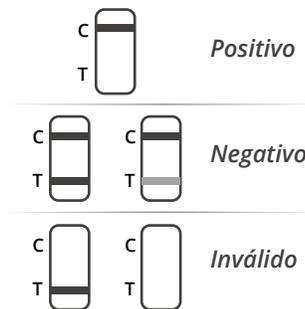

Acerca de CERTUM

CERTUM es una marca que ofrece una amplia gama de kits de pruebas de diagnóstico innovadores que ayudan a brindar respuestas a los profesionales de la salud. Los productos CERTUM ofrecen precisión, simplicidad y velocidad para el diagnóstico temprano y el monitoreo de afecciones médicas comunes, incluyendo pruebas para la detección de drogas de abuso, embarazo, marcadores cardiacos, marcadores tumorales y pruebas de enfermedades infecciosas entre otros. Los productos de diagnóstico CERTUM se usan fuera del cuerpo humano y requieren poco o ningún equipo especial. CERTUM tiene como misión mejorar el bienestar del paciente, reduciendo los costos y tiempos totales de los resultados de exámenes de diagnóstico, manteniendo la calidad y estándares altos esperados por los profesionales de la salud. CERTUM tiene una participación de mercado importante en hospitales, laboratorios de referencia, centros de investigación, consultorios médicos, servicios de salud ocupacional y programas de salud pública debido a su precisión, asequibilidad y facilidad de uso.

Ventajas y Beneficios

- Todos nuestros productos cumplen con el objetivo de ser rápidos.
- Económicos.
- Fáciles de utilizar.
- Confiables.

Información para Pedidos

Catálogo	Formato	Parámetro	Contenido
DOA-124	Panel	(THC/COC)	25 pruebas
DOA-134	Panel	(THC/COC/AMP)	25 pruebas
DOA-154-2	Panel	(THC/COC/AMP/BAR/BZD)	25 pruebas
DOA-154-4	Panel	(THC/COC/AMP/MET/BZD)	25 pruebas
DOA-154	Panel	(THC/COC/AMP/MET/OPI)	25 pruebas
DOA-164	Panel	(THC/COC/AMP/MET/OPI/BZD)	25 pruebas
DOA-134-2	Panel	(THC/COC/MET)	25 pruebas
HCDOAA-234	Frasco Split Screen	(THC/COC/MET)	25 pruebas
HCDOAA-334	Frasco Split Screen	(THC/COC/AMP)	25 pruebas
HCDOAA-1454	Frasco Split Screen	(COC/AMP/THC/PCP/MET)	25 pruebas
HCDOAA-154	Frasco Split Screen	(COC/AMP/THC/PCP/OPI)	25 pruebas
HCDOAA-1254	Frasco Split Screen	(THC/COC/AMP/BAR/BZD)	25 pruebas
HCDOAA-254	Frasco Split Screen	(THC/COC/AMP/MET/OPI)	25 pruebas
HCDOAA-164	Frasco Split Screen	(THC/COC/AMP/MET/OPI/PCP)	25 pruebas
HCDOAA-1364	Frasco Split Screen	(THC/COC/AMP/MET/PCP/BZD)	25 pruebas
HCDOAA-1164	Frasco Split Screen	(THC/COC/AMP/MET/BAR/BZD)	25 pruebas
HCDOAA-264	Frasco Split Screen	(THC/COC/AMP/MET/OPI/BZD)	25 pruebas
HCDOAA-474S	Frasco Split Screen	(COC/AMP/THC/MET/OPI/PCP/MDMA)	25 pruebas
HCDOAA-974N	Frasco Split Screen	(THC/CPC/AMP/MET/OPI/BZD/BAR)	25 pruebas
HCDOAA-3104	Frasco Split Screen	(AMP/CO/TH/ME/OP/PCP/BZ/BA/MTD/MDMA)	25 pruebas
HCDOAA-18104	Frasco Split Screen	(THC-COC/AMP/MET/OPI/BZD/BAR/TCA/MDMA/PCP)	25 pruebas
HCDOAA-984S	Frasco Split Screen	(THC/COC/AMP/MET/OPI/BZD/BAR/PCP)	25 pruebas
HCDOAB-X4X	Frasco Simple	(AMP/COC/MET/OPI)	25 pruebas
HCDOAB-X5X	Frasco Simple	(AMP/COC/MET/MOR/XTC)	25 pruebas
HCDOAB-X5X2	Frasco Simple	(AMP/COC/MOR/PCP/THC)	25 pruebas
HCDOAB-1164. 6	Frasco Simple	(AMP/BAR/BZD/COC/MET/THC)	25 pruebas
HCDOAB-18115E3A6	Frasco Simple	(COC/AMP/MET/MOP/THC/BZ0/BAR/PCP/MDMA) + ETG + ADU	25 pruebas
HCDOAB-334. 3	Frasco Simple	(AMP/COC/THC)	25 pruebas
HCDOAB-255. 5	Frasco Simple	(AMP/COC/MET/MOR/THC)	25 pruebas
DAM-101	Tira	Anfetamina (AMP 1000 ng/mL)	50 pruebas
DBA-101	Tira	Barbitúricos (BAR 200 ng/mL)	50 pruebas
DBZ-101	Tira	Benzodiazepina (BZD 200 ng/mL)	50 pruebas
DCO-101	Tira	Cocaína (COC 300 ng/mL)	50 pruebas
DPC-101	Tira	Fenciclidina (PCP 25 ng/mL)	50 pruebas
DTH-101	Tira	Marihuana (THC 50 ng/mL)	50 pruebas
DME-101	Tira	Metanfetamina (MET 1000 ng/mL)	50 pruebas
DMP-101	Tira	Metilfenidato (MDP)	50 pruebas
DOP-101	Tira	Morfina - Opiáceos (MOR2000 ng/mL)	50 pruebas
DMP-102	Cassette	Metilfenidato (MDP)	40 pruebas
DFY-102	Cassette	Fentanyl (FYL)	40 pruebas
DAM-102	Cassette	Anfetamina (AMP 1000 ng/mL)	40 pruebas
DTC-102	Cassette	Antidepresivos tricíclicos (TCA)	40 pruebas
DBA-102	Cassette	Barbitúricos (BAR 200 ng/mL)	40 pruebas
DBZ-102	Cassette	Benzodiazepina (BZD 200 ng/mL)	40 pruebas
DCO-102	Cassette	Cocaína (COC 300 ng/mL)	40 pruebas
DMD-102	Cassette	Extasis (MDMA 500 ng/mL)	40 pruebas
DPC-102	Cassette	Fenciclidina (PCP 25 ng/mL)	40 pruebas
DET-102	Cassette	Glucuronida de etilo (ETG) - Metabolito de Alcohol	40 pruebas
DLS-102	Cassette	LSD	40 pruebas
DTH-102	Cassette	Marihuana (THC 50 ng/mL)	40 pruebas
DME-102	Cassette	Metanfetaminas (MET 1000 ng/mL)	40 pruebas
DOP-102	Cassette	Opiáceos (OPI 2000 ng/mL)	40 pruebas
DSM-102	Cassette	K2 (Marihuana Sintética)	40 pruebas